


0° ShapeSmart 取扱説明書

品番：MIO-SS1

シェイブスマート

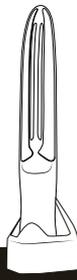

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後はいつでも取り出せる所に大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。


- 下記に該当する場合は誤作動を起こすおそれがありますので使用しないでください。
 - ・ペースメーカー等の体内埋め込み型医療電子機器との併用。
 - ・人工心臓用の生命維持用電子機器との併用。
 - ・心電計等の装着型の医療電子機器との併用。
- 下記に該当する場合は使用しないでください。またはご使用前に医師にご相談ください。
 - ・急性疾患・心臓疾患・有熱性疾患・血圧異常・感染症疾患・結核性疾患・悪性腫瘍。
 - ・妊娠中・生理中・アトピー性疾患・アレルギー体質・血友病疾患・肌や頭皮が敏感な方。
 - ・ステロイド系抗炎症薬の長期使用や肝機能障害により毛細血管拡張を起こしている方。
 - ・飲酒後・薬を服用中・激しく疲労している・化学繊維でかぶられた経験がある。
 - ・日焼けにより炎症を起こしている・適応部位に傷や異常がある・健康が特に優れない。
- 下記に該当する部位には使用しないでください。
 - ・整形手術した部位・目・まぶた・耳・口の中・感覚や知覚麻痺を起こしている部位・顔面黒皮症。
 - ・湿疹、かぶれ、ニキビ、吹き出物などで炎症を起こしている部位・金属、プラスチック、シリコンなどが埋め込まれている部位・物理的刺激等による炎症・シミのある部位。
- 分解・修理・改造しない。
 - ・火災、感電、けがの原因になります。
 - ・修理については、保証書に記載のお客様相談窓口までご連絡ください。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。
 - ・本体が破損した。煙が出ている。異臭がする。異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因になります。その場合、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分に確認してから電源をOFFにしてください。
- 本製品を落としたり、ぶつかけたりしない。
 - ・破損したまま使用すると、火災や感電の原因となります。
 - ・万が一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源をOFFにしてください。
- 熱い場所や熱のかかる状態で使用しない。
 - ・サウナなどの熱い場所や、ドライヤーを使用しながら使用しないでください。
 - ・火災や感電の原因になることがあります。

バッテリーについての警告

- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う。
目に損傷が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。
- バッテリーは分解しない。
発熱や破裂により、火災やけがの原因になります。
- 指定以外の方法で充電しない。
●高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない。
●バッテリーを火に掛けたり、加熱したりしない。
●バッテリーを、高い所から落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない。
●バッテリーを水につけない。
…発熱、破裂、液漏れにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になります。

各部の名称と付属品 / 製品仕様について

■ 本体・各部の名称

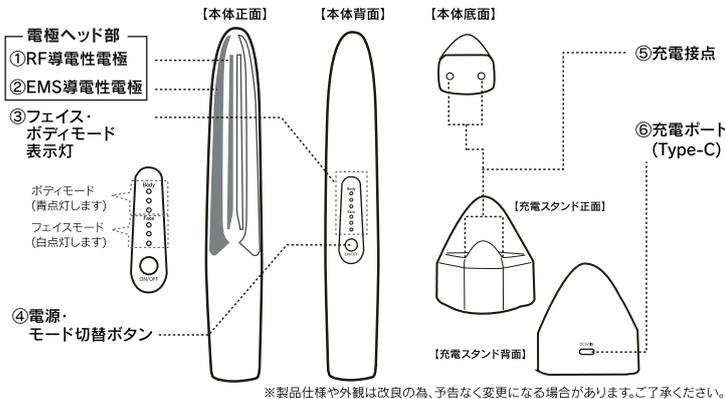

■ 付属品

本製品には本体のほか、下記付属品が同梱されております。開封後必ずご確認ください。



■ 製品仕様

製品名	ShapeSmart シェイブスマート
品番	MIO-SS1
サイズ	高さ240×35mm(本体)(充電スタンド除く)
本体重量	約135g
材質	本体・充電スタンド(ABS材質・ポリカーボネート)
バッテリー容量	3000mAh
充電時間*1	約3.5時間(満充電まで、5V 2.0A出力のアダプタ充電器使用時)
連続使用時間*1	フェイスモード 約3.5時間 / ボディモード 約4.5時間(負荷時・レベル最大時)
バッテリー充電回数*1	約500回
定格入力	100~240V 50/60Hz
定格電圧/電力	5V/8W
防塵・防水性能	IP67
使用環境温度	0℃~40℃

*1 実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損傷が発生するおそれがある内容を示しています。

- 本製品を次のようなところには置いたりしない。
 - ・日の当たる自動車内、直射日光の当たるところ、暖房機器の周辺など高温になるところ。
 - ・多湿なところ、結露を起こすところ、平坦でないところ、振動が発生するところ。
 - ・小さなお子様やペットなどが触れるところ。
- 小さなお子様には触れさせない。
 - ・小さな部品があり、誤飲など思わぬ事故に繋がる場合があります。
- LED部分を直視しすぎない。
 - ・失明や、視力の低下などに繋がる場合があります。
- 充電する際は濡れた手でやらない。
 - ・感電や本体の破損などの原因になります。
- 充電する際は本体が乾いた状態で行う。
 - ・本体が濡れた状態で充電を行うと、感電や破損などの原因となります。
- 充電は付属のケーブルを使用する。
 - ・充電の際は付属の充電ケーブルを使用してください。

バッテリーについての注意

- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。
 - …引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す。
 - …皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない。
 - …発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- バッテリーを廃棄するときは、乳幼児の手の届く所に置かない。
 - …感電やけがの原因になります。

使用上のご注意

- 使用後は電源がOFFになっていることを確認してください。●推奨される使用時間をお守りください。
- 整髪剤などが付着していない、清潔な状態で使用してください。●使用後は毎回清潔な状態にしてください。
- 肌に異常を感じた場合は使用をおやめください。

防水について

- 防水性能は真水のみ適用されます。
- 濡れたまま放置すると経年劣化を早める原因となります。使用後はしっかりと乾かしてください。

保管方法について

- 清潔な状態にしてから保管してください。
- 風呂場などの水分や湿気の多いところ、直射日光の当たるところ、湿度の高いところや、ほこりの多いところは避けて保管してください。
- 傾斜のあるところや、落下しやすいところは避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く範囲やペットが触れる場所は避けて保管してください。
- 長期間保管する場合は満充電にしてから保管してください。

リチウムイオンバッテリーについて

- バッテリーの充電には、同梱の充電器を使用し、充電条件を守ってください。
- 指定外の充電条件(指定以上の高い温度、指定以上の充電電圧や大きな電流、改造した充電器など)で充電すると、過充電され、電池が発熱、破裂、発火する原因となります。
- バッテリーの使用・充電中、保管時に異臭を発生したり、異常に発熱をしたり、今までと異なることに気がついたときには、本機器を充電器より取り外し、その後の使用は避けてください。
- 充電の際に規定の充電時間を超えても、充電が完了しない場合には、充電を止めてください。電池が充電器の異常と考えられますので、そのまま充電を続けると電池が漏洩、発熱、破裂、発火する原因となるおそれがあります。
- 充電中は必ず目を離さず、注意監視してください。
- 車など高温になる場所に放置しないでください。
- 電池が高温になると破裂を起こす危険性があります。

取り扱い方

開封後、はじめに使用する前に、十分に充電されていることをご確認ください。
電源が入らない場合、または電源を入れた後にバッテリー残量が少なくなったために自動的に停止する場合は必ず充電をしてください。

■ 充電方法

- 1 充電スタンドのType-Cポートに付属のType-Cケーブルを接続します。



- 2 付属のAC-USB充電器に付属のType-Cケーブルを接続します。

- 3 付属のAC-USB充電器をコンセントに差し込みます。

- 4 本体を充電スタンドにセットして充電する。

6つの表示灯が順番に点灯し、充電を開始します。
充電が完了すると6つの表示灯全てが点灯します。

- 約3.5時間で満充電になり、連続で約3.5時間使用可能です。
- ※実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。
※6分間の使用で約35回

！ 充電中は作動しません。

電源・モード切替ボタンを長押しすると電源がONになりますが、充電スタンドに差し込んでいる状態(充電中)のときは電源がONになりません。

充電中について

- 充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働回数は、本製品の使用頻度や使用環境によって異なります。
- 充電に適した室温は15~30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行ってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵バッテリー保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回程度は充電を行ってください。
- 正しく充電された状態であっても稼働回数および稼働時間が短い場合は、バッテリーの寿命です。
- 内蔵バッテリーの交換はできません。

使用方法

1 電源を入れる

●本体背面の電源・モード切替ボタンを長押し(約3秒)するとビツと音が鳴り電源がONになります。

電源・モード切替ボタン

●電源・モード切替ボタンを短押しするとビツと音が鳴りフェイスモードレベル1から、フェイスモードレベル2→フェイスモードレベル3→ボディモードレベル1→ボディモードレベル2→ボディモードレベル3→フェイスモードレベル1と順に繰り返します。

●フェイスモード表示灯(白色点灯)

フェイスモード時はレベルに応じて下3つのいずれかが白色点灯します。



●ボディモード表示灯(青色点灯)

ボディモード時はレベルに応じて上3つのいずれかが青色点灯します。



2 使用する

●使用方法につきましては、次ページのご使用の際のポイントと、下記注意を必ずお読みになり、正しくご使用ください。

▲ 注意

- 肌の表面に微振動を感じますが、これは皮膚や筋肉への刺激を与える為です。
- 絶対に肌の一面箇所に集中して当てないでください、熱が皮膚の表面に長時間作用し、皮膚を火傷するおそれがあります。
- 必ず動かしながらかご使用ください。
- お手入れの表面が乾いた状態で使用するのは絶対におやめください。
- 最初は必ずフェイスモード/ボディモード共にレベル1からご使用ください。
- 刺激や熱が強くないかご確認のうえご使用ください。
- 肌に痛みや異常を感じたら直ぐに使用をおやめください。

3 電源を切る

- 作動している状態で電源・モード切替ボタンを長押し(約3秒)すると、ピーと音が鳴り、電源がOFFになります。
- 電源OFFタイマーがついているので約6分間で充電表示灯が消灯し、ピーと音が鳴り自動的にOFFになります。再度ご使用する場合は、電源・モード切替ボタンを長押し(約3秒)して電源をONにしてご使用ください。
- 作動している状態で充電スタンドに差し込むと電源がOFFになり、充電が始まります。

ご使用のあとは

- ご使用後は、本体の電極ヘッド部を柔らかい布やクリーニングクロスで拭いてください。50℃を超える熱湯で掃除しないでください。
- 本体の電極ヘッド部を研磨剤クリーナー・サンドペーパー等で掃除しないでください。

故障かな?と思ったら

●使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	確認していただくこと
電源が入らない	●十分に充電されていない可能性があります。再度充電をおこなってください。 ●はじめての充電時や長期間未使用の際の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻ります。 ●市販のACアダプタで充電する場合は推奨アダプタの仕様とあっているかご確認ください。推奨アダプタ:定格出力DC5V2A以上
充電ができない、充電表示灯が点灯しない	●本体の下部にある2つの充電接点汚れしている可能性があるので掃除する。 ●充電スタンドの2つの充電接点汚れしている可能性があるので掃除する。
肌に違和感や刺激が強い	●肌の表面が乾燥して抵抗が大きいため、クリームを塗布し、肌を潤せた状態でご使用ください。 ※弊社別売り・推奨クリーム
電極ヘッドが肌に触れた時の感覚が無い	●電極ヘッドが汚れている可能性があるため、ヘッド部表面を清掃し、あぶら汚れなどを取り除いてください。
満充電にしてもすぐに電源が切れる(保証期間後)	●バッテリーには寿命があり、充電ごとに徐々に劣化していきます。本製品はバッテリー交換をしておりませんので、新しい製品をお買い求めください。

■上記で解決しない場合は、お客様相談窓口までご連絡ください。

廃棄する場合は

●本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。お住いの地方自治体の条例に従って処分してください。条件の詳しい内容は、各自自治体にお問い合わせください。USBコードやその他付属品も、お住いの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



ご使用の際のポイント

▲ご使用時は必ずクリームを塗布してお使いください。 ※弊社別売り・推奨クリーム

- 入浴後など、清潔な状態でご使用ください。
- 目やまぶたには絶対に使用しないでください。



イラスト(イメージ)を参考にして、肌やボディラインにご使用ください。



フェイスパターン (6分間:1日1回推奨)

肌の質感を整え、年齢に応じたケアをサポートします。適度な刺激で、リフレッシュした印象を与えます。



ボディパターン (6分間:1日1回推奨)

肌を引き締め、リフレッシュした感覚を得られます。

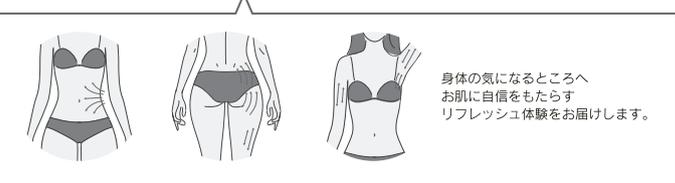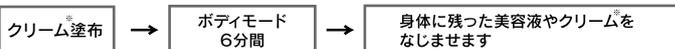

※弊社別売り・推奨クリーム

ShapeSmart -シェイプスマート- 保証書

●本製品をご購入いただきありがとうございます。本書はご購入の日から下記期間中に故障が発生した場合には、本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。ご記入いただく個人情報利用目的は下記に記載しております。

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は無償修理させていただきます。
- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証書は販売証明書またはご購入レシートと一緒に保管してください。
- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間内でも有償となる場合があります。(販売証明書またはレシート紛失の場合は有償となります)
- 保証期間後の修理はご購入レシートを所持するうえにご相談ください。
- 修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理をいたします。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●保証期間(1年間) お買い上げレシートと一緒に大切に保管してください。

ShapeSmart シェイプスマート MIO-SS1

ご購入日 年 月 日

販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障などに対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●お買い上げレシートなどと一緒に保管してください。●記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

輸入元 株式会社ミオテック 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3-7-20(3F)

お客様相談窓口

050-1147-0114

受付時間 10:00~17:00(平日のみ)

※PHS、IP電話などの一部の電話からのご利用はできません。

E-mail: support@miotech.jp